


V-Veil UP2™

KIT 4.3

V-Veil UP2™ & tub
UP2 cu Retrofitter™

Vă rugăm să citiți și să păstrați acest prospect

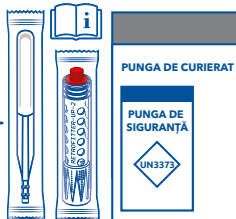

Urmăriți videoclipul în română
despre cum se utilizează
dispozitivul inclus în KIT

CE ESTE ȘI CÂND POATE FI UTILIZAT V-Veil UP2™ KIT 4.3?

V-Veil UP2™ KIT 4.3 este un pachet de proceduri de auto-prelevare folosit pentru a colecta secreții, diverse fluide și substanțe, care se află în cavitatea vaginală și colul uterin pentru diagnostic prin teste de laborator.

ATENȚIE! Acest KIT poate fi utilizat în timpul sângerărilor, al sarcinii sau în urma unui sindrom de șoc toxic doar la recomandarea unui specialist în domeniul medical.

CONȚINUT:

- 1 Voal Vaginal Colector **V-Veil UP2™**, care este un dispozitiv medical dezinfectat UVC, nesteril, de clasa I
- 1 Instrucțiuni de utilizare
- 1 UP2 Retrofitter Tub
- 1 pungă de siguranță UN3373
- 1 pungă curierat

Este necesar un cronometru, care nu este inclus în kit.

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI:

- Spălați-vă pe mâini înainte de a utiliza acest KIT.
- Nu utilizați dacă ați avut activitate sexuală în ultimele 2 zile.
- Nu utilizați dacă ați spălat cavitatea vaginală în ultimele 48 de ore.
- Cu 48 de ore înainte de auto-recoltare trebuie evitate alte tratamente intravaginale (ovule, geluri, creme, contraceptive, dezinfectante, lubrifianți) sau alte manevre intravaginale (periuță cervicală, tamponare intravaginale, servetele intravaginale, explorare vaginală)
- Dacă sunteți însărcinată sau prezentați sânge în cavitatea vaginală, utilizați acest dispozitiv medical numai la recomandarea medicului dumneavoastră.
- Voalul nu trebuie să rămână în vagin mai mult de 30 de minute, însă dacă uitați să îl înălțurați, îndepărtați-l imediat ce v-ați amintit.
- Utilizați un singur voal o dată.
- Voalul nu trebuie refolosit, nici măcar atunci când nu este impregnat.
- Pentru mai multe recomandări, discutați cu medicul, ginecologul sau farmacistul dumneavoastră.

CUI ÎI ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA ACESTUI PRODUS? Femeilor care:

- au febră sau simptome de tip gripal, chiar și în formă ușoară.
- au suferit deja un sindrom de șoc toxic și nu au recomandarea unui specialist în domeniul medical pentru efectuarea testului.
- sunt alergice la materiale plastice și derivate ale acestora.
- au sub 18 ani, fără acordul părinților și/sau al unui cadru medical.
- nu au citit în mod deliberat fișa de instrucțiuni.
- au sângerări și nu au recomandarea unui specialist în domeniul medical pentru efectuarea testului.
- sunt însărcinate și nu au recomandarea unui specialist în domeniul medical pentru efectuarea testului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SINDROMUL DE ȘOC TOXIC: Sindromul de șoc toxic (SST) este o infecție rară care poate afecta copiii, bărbații și femeile (indiferent dacă sunt sau nu la menstruație). Este cauzat de o toxină produsă de o bacterie (stafilococ) care există în mod obișnuit în corp. Jumătate din cazurile de SST înregistrate până în prezent au apărut la adolescente și femei în timpul menstruației. Sindromul a fost asociat cu utilizarea tamponelor, dar poate apărea de asemenea și când sunt utilizate alte mijloace de protecție (absorbante, linere...). SST este o infecție ce poate fi fatală și din acest motiv trebuie depistată foarte devreme și tratată imediat. Simptomele SST pot apărea brusc, în timpul menstruației, sau la puțin timp după aceea. Este posibil să nu fie toate prezente și să nu apară simultan: febră bruscă (>39°C), vărsături, diaree, dureri în gât, vertij, leșin, dureri musculare, erupții cutanate similare arsurilor solare (pielea se poate decoji câteva zile mai târziu). Dacă prezentați aceste simptome, trebuie să scoateți imediat voalul și să consultați medicul personal sau medicul cel mai apropiat. SST poate apărea cu sau fără utilizarea **V-Veil UP2™**. Dacă ați dezvoltat deja un SST, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza **V-Veil UP2™**. Utilizând corect **V-Veil UP2™** și respectând recomandările, veți diminua riscul de a dezvolta un sindrom de șoc toxic.

PĂSTRARE:

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură.

RAPORTAREA INCIDENTELOR

ATENȚIE ! Numai instrucțiunile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, în pofida măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că ați primit un produs cu defecte, vă rugăm să nu îl utilizați și să luați legătura cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți localizat. KIT-ul **V-Veil UP2™** este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale Uniunii Europene.

MD	Dispozitiv medical
CE	Conformitate Europeană
	Nesteril
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	A se păstra uscat
	A se păstra departe de lumina soarelui
	Nu reutilizați
	Atenție
	Citiți instrucțiunile
IVD	Diagnosticare in Vitro
	Aruncați gunoii în coș
	Nu aruncați în toaletă



Distribuitor autorizat: vedeți informațiile înscrise pe ambalaj.

Brevete în așteptare - Voal Vaginal Colector **V-Veil UP2™**

V-VEIL-UP PRODUCTION SRL


Clocanesti 280B Calimesi
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ETAPA 1


- 1** Spălați-vă pe mâini și ștergeți-le cu un prosop curat.




- 2** Deschideți pachetul și scoateți **V-Veil UP2™** din ambalajul său, desfășcându-l în partea special prevăzută în acest sens. Păstrați pachetul și aruncați ambalajul desfăcut împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

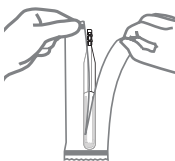



- 3** Prindeți cu degetele aplicatorul de partea terminală (în zona de prindere). Relaxați-vă și alegeți poziția care vi se pare cea mai confortabilă: șezând cu picioarele depărtate, în picioare cu un picior ridicat sau în picioare cu picioarele ușor flexate. Depărtați labiile exterioare și apropiați partea superioară a **V-Veil UP2™** de vagin. Introduceți ușor voalul cu ajutorul aplicatorului. Continuați să împingeți ușor voalul cu ajutorul aplicatorului până ce zona de prindere rămâne în afara vaginului. Partea terminală în formă de "V" trebuie să atârne liber în exteriorul vaginului.

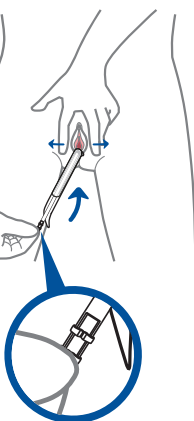

- 4** Pentru a scoate aplicatorul, trageți-l ușor afară, având grijă să nu trageți și voalul. Aruncați aplicatorul împreună cu deșeurile menajere obișnuite. **ATENȚIE!** În funcție de dimensiunea vaginului și de modul în care ați introdus voalul intravaginal, este obligatoriu ca extremitatea în formă de "V" să rămână vizibilă, astfel încât să poată fi îndepărtat după utilizare.

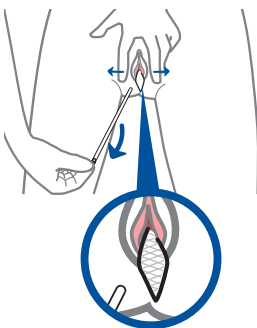


- 5** Așteptați cu voalul introdus în cavitatea vaginală 2 minute.

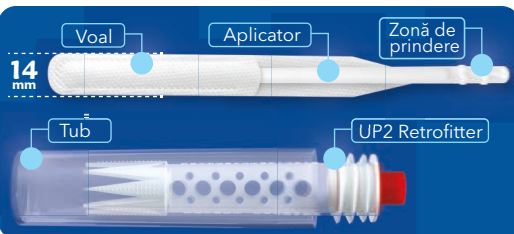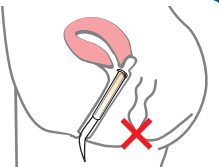

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ETAPA 2


- 6** Spălați-vă pe mâini și ștergeți-le 7 cu un prosop curat. Deschideți capacul tubului **UP2 Retrofitter™** și țineți-l în mână, evitând contactul lui cu orice il poate contamina. Așezați tubul pe o suprafață plană și curată.

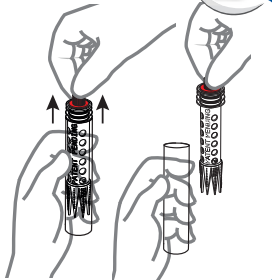


- 7** Pentru a scoate **V-Veil UP2™** relaxați-vă și alegeți poziția care vi se pare cea mai confortabilă din cele prezentate mai sus. Voalul se îndepărtează ușor trăgând de partea terminală în formă de "V".



- 8** Introduceți voalul utilizat în interiorul tubului.

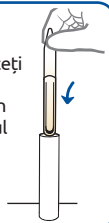

- 9** Închideți prin apăsare capacul **UP2 Retrofitter™** până ce se aude de 3 ori "click", păstrând specimenul prelevat între pereții Retrofitter-ului și ai tubului.

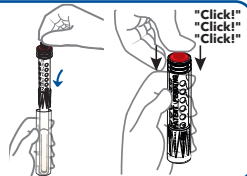

- 10** Puneți recipientul cu proba colectată în punga de siguranță. Sigilați punga și introduceți-o în cutia KIT-ului. Cutia KIT-ului se introduce în punga de curierat. Înmânați coletul curierului cât mai repede posibil (max. 48h).

