


V-Veil UP2™ KIT 1.3

V-Veil UP2™ & UP2 Retrofitter™ Röhrchen

Lesen Sie bitte diese Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf

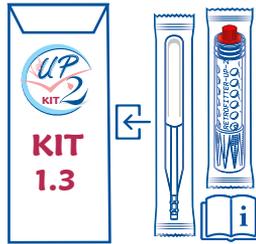

Sehen Sie sich das Video in englischer Sprache zur Verwendung der im KIT enthaltenen Vorrichtung an.

WAS IST „V-Veil UP2“ KIT 1.3 UND WANN KANN ES VERWENDET WERDEN?

V-Veil UP2™ KIT 1.3 ist ein Selbstentnahme-Paket, mit dem Sekrete, verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen, die sich in der Vaginalhöhle und im Gebärmutterhals befinden, für die Diagnose durch Labortests gesammelt werden.

ACHTUNG! Dieses KIT kann während Blutungen und Schwangerschaft oder nach einem toxischen Schocksyndrom nur auf Empfehlung einer medizinischen Fachperson verwendet werden.

INHALT:

- 1 Schleier-Vaginalsammler **V-Veil UP2™**, der eine unsterile, mit UVC desinfizierte medizinische Vorrichtung der Klasse I ist
 - 1 Gebrauchsanweisung
 - 1 Röhrchen für die Aufbewahrung und den Transport von Proben
- Eine Stoppuhr, die nicht im Kit enthalten ist, wird benötigt.

EMPFEHLUNGEN UND RATSCHLÄGE:

- Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie dieses KIT verwenden.
- Nicht verwenden, wenn Sie in den letzten 2 Tagen Geschlechtsverkehr hatten.
- Nicht verwenden, wenn Sie vor weniger als 48 Stunden die Vaginalhöhle gespült haben.
- 48 Stunden vor der Selbstentnahme sollten andere intravaginale Behandlungen (Zäpfchen, Gele, Cremes, Verhütungsmittel, Desinfektionsmittel, Gleitmittel) oder andere intravaginale Manöver (Zervixbürste, intravaginale Tampons, intravaginale Tücher, Vaginaluntersuchung) vermieden werden.
- Wenn Sie schwanger sind oder Blut in der Vaginalhöhle haben, verwenden Sie diese medizinische Vorrichtung nur auf Empfehlung Ihres Arztes.
- Der Schleier darf nicht länger als 30 Minuten in der Scheide bleiben, aber wenn Sie vergessen, ihn zu entfernen, entfernen Sie ihn, sobald Sie sich daran erinnern.
- Verwenden Sie jeweils nur einen Schleier.
- Der Schleier darf nicht wiederverwendet werden, auch wenn er nicht imprägniert ist.
- Für weitere Empfehlungen fragen Sie Ihren Arzt, Gynäkologen oder Apotheker.

FÜR WENN IST DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS UNTERSAGT? Für Frauen, welche:

- Fieber oder grippeähnliche Symptome haben, auch wenn diese leicht sind.
- bereits ein toxisches Schocksyndrom erlitten haben und nicht über die Empfehlung einer medizinischen Fachperson zur Durchführung des Tests verfügen.
- allergisch gegen Kunststoffstoffe und ihre Derivate sind.
- unter 18 Jahre alt sind, ohne elterliche und/oder ärztliche Zustimmung.
- die Gebrauchsanweisungen nicht bedachtsam gelesen haben.
- Blutungen haben und nicht über die Empfehlung einer medizinischen Fachperson zur Durchführung des Tests verfügen.
- schwanger sind und nicht über die Empfehlung einer medizinischen Fachperson zur Durchführung des Tests verfügen.

WICHTIGE HINWEISE ZUM TOXISCHEN

SCHOCKSYNDROM: Das toxische Schocksyndrom (TSS) ist eine seltene Infektion, die Kinder, Männer und Frauen (ob sie gerade ihre Menstruation haben oder nicht) betreffen kann. Es wird durch ein Toxin verursacht, das von einem häufig im menschlichen Körper befindlichen Bakterium (Staphylococcus) produziert ist. Die Hälfte der bis heute erfassten TSS-Fälle traten bei Mädchen und Frauen während der Menstruation auf. TSS wurde in Verbindung mit der Tamponverwendung gebracht, es kann aber auch bei Verwendung anderer Schutzmittel (Binden, Slipeinlagen, ...) auftreten. TSS wurde in Verbindung mit der Tamponverwendung gebracht, es kann aber auch bei Verwendung anderer Schutzmittel (Binden, Slipeinlagen, ...) auftreten. TSS-Symptome können plötzlich während der Menstruation oder kurz danach auftreten. Es ist möglich, dass nicht alle und dass sie nicht gleichzeitig auftreten: plötzliches Fieber (>39°C), Erbrechen, Durchfall, Halsschmerzen, Schwindel, Ohnmacht, Muskelschmerzen, Hautausschläge wie beim Sonnenbrand (die Haut kann sich einige Tage danach schälen). Wenn Sie diese Symptome haben, müssen Sie den Schleier sofort entfernen und Ihren Arzt oder den nächst erreichbaren Arzt aufsuchen. TSS kann mit oder ohne Verwendung von **V-Veil UP2™** auftreten. Wenn Sie bereits ein TSS entwickelt haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie **V-Veil UP2™** verwenden. Wenn Sie **V-Veil UP2™** richtig verwenden und den Empfehlungen folgen, verringern Sie die Gefahr, ein toxisches Schocksyndrom zu entwickeln.

AUFBEWAHRUNG:

An einem sauberen, trockenen Ort und vor Wärmequellen geschützt.

MELDUNG VON VORFÄLLEN. ACHTUNG! Als Referenz für rechtliche Informationen, für Anwendungen und Einschränkungen gelten ausschließlich die Gebrauchsanweisungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder das Verfalldatum überschritten ist. Sollten Sie trotz der Sorgfalt beim Herstellen unserer Produkte der Ansicht sein, dass Sie ein fehlerhaftes Produkt bekommen haben, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an den Hersteller oder den Vertriebshändler unter genauer Angabe des aufgetretenen Problems sowie der Chargennummer auf der Verpackung. Vorfälle in Zusammenhang mit der Vorrichtung sind dem Hersteller an die E-Mail-Adresse client@vvup.org und bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie sich befinden, zu melden. Das KIT **V-Veil UP2™** wird in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen und Anforderungen der Europäischen Union hergestellt.

	Medizinische Vorrichtung
	Europäische Konformität
	Unsteril
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Trocken halten
	Vor Sonnenlicht schützen
	Nicht wiederverwenden
	Achtung
	Anweisungen lesen
	In-vitro-Diagnostikum
	Den Müll in den Mülleimer werfen
	Nicht in die Toilette werfen



Autorisierter Vertriebshändler:
siehe Verpackungsinformationen.

Angemeldete Patente -
Schleier-Vaginalsammler **V-Veil UP2™**


V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Clocanesti 280B Calimesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620

GEBRAUCHSANWEISUNGEN SCHRITT 1

1

1 Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab.

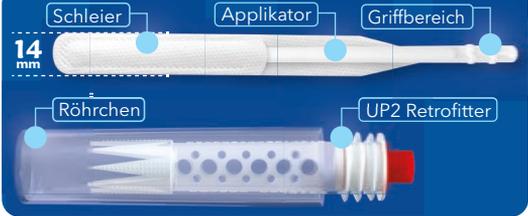


2 Öffnen Sie die Packung und entnehmen Sie den **V-Veil UP2™** aus seiner Verpackung, indem Sie sie an dem dafür vorgesehenen Teil öffnen. Bewahren Sie die Packung auf und entsorgen Sie die geöffnete Verpackung über den normalen Haushaltsmüll.




GEBRAUCHSANWEISUNGEN SCHRITT 2

2


3 Fassen Sie den Applikator am Endteil (im Griffbereich) mit den Fingern. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Stellung aus, die Sie am bequemsten finden: sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit leicht gebeugten Beinen. Spreizen Sie die äußeren Schamlippen und bringen Sie den oberen Teil des **V-Veil UP2** nah an die Scheide. Führen Sie den Schleier mithilfe des Applikators behutsam ein. Führen Sie den Schleier mithilfe des Applikators behutsam ein. Der V-förmige Endteil muss frei an der Außenseite der Scheide hängen.

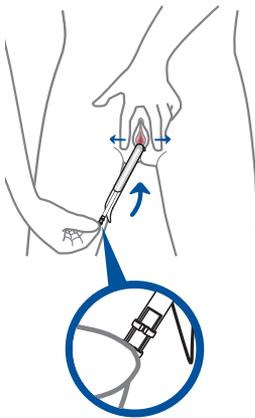


6 Um den Schleier **V-Veil UP2™** zu entfernen, waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Öffnen Sie die **UP2 Retrofitter™** Kappe des Röhrrchens und halten Sie sie in der Hand. Legen Sie das Röhrrchen auf eine flache, saubere Fläche.

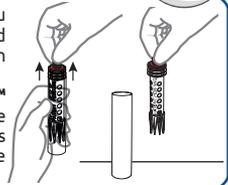


7 Entspannen Sie sich und wählen Sie aus den oben genannten Stellungen diejenige aus, die Sie am bequemsten finden. Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht.

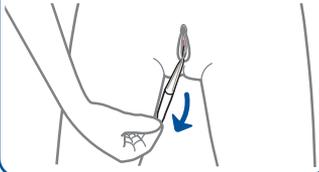


8 Legen Sie die Probe in das Röhrrchen.

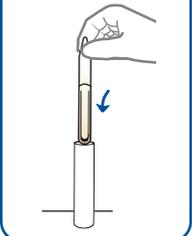

9 Drücken Sie die **UP2-Retrofitter™** Kappe, bis Sie dreimal ein „Klick“ hören. Halten Sie dabei die Probe zwischen den Wänden des Retrofitter und dem Röhrrchen.

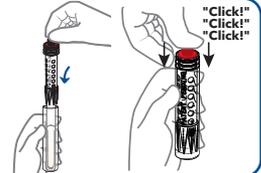

4 Um den Applikator zu entfernen, ziehen Sie ihn sanft heraus und achten Sie darauf, dass Sie nicht auch den Schleier ziehen. Entsorgen Sie den Applikator über den normalen Haushaltsmüll. **ACHTUNG!** Je nach Größe der Scheide und der Art und Weise, wie Sie den intravaginalen Schleier eingeführt haben, ist es unbedingt erforderlich, dass der V-förmige Endteil sichtbar bleibt, damit er nach Gebrauch entfernt werden kann.

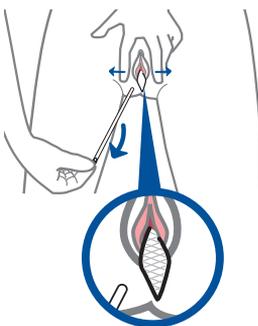

10 Bewahren Sie den Behälter mit der entnommenen Probe an einem sauberen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort auf. Befolgen Sie die Schritte, die von Ihrem Arzt, Apotheker oder der Fachkraft, die Ihnen die Selbstentnahme empfohlen hat, empfohlen wurden.

5 Sie müssen 2 Minuten mit dem Schleier in der Vaginalhöhle warten.

