

Tub UP2 cu Retrofitter™ nesteril, de unică folosință

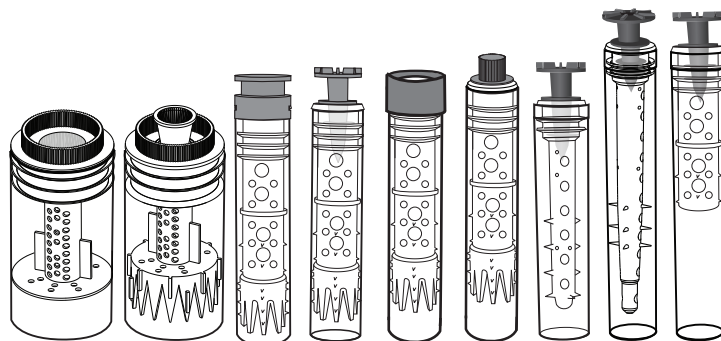
Citiți cu atenție prospectul produsului înainte de utilizare
Pentru diagnostic *in vitro*

Domeniu de utilizare

Tubul cu UP2 Retrofitter™ este un recipient utilizat pentru colectarea, depozitarea, conservarea, transportul și efectuarea analizelor de laborator pentru diagnostic *in vitro* a specimenelor. Produsul este destinat a fi utilizat pentru ca profesionistul sau pacientul să colecteze, depoziteze și transporte secreții, diferite fluide și substanțe din nas, urechi, cavitatea bucală, vaginală, cervix și anus, pentru examinare ulterioară. După închidere, tubul cu UP2 Retrofitter™ nu mai permite atingerea probei colectate, păstrând specimenul între pereții acestuia și ai tubului.

Modele tub cu UP2 Retrofitter™


Brevete în așteptare



Descriere produs

Tubul cu UP2 Retrofitter™ este un recipient prevăzut cu UP2 Retrofitter™ - element care permite menținerea mostrei prelevate între pereții tubului și pereții acestuia. Tubul se poate închide cu capac, atașat la UP2 Retrofitter™, sau UP2 Retrofitter™ poate fi prevăzut cu o folie de aluminiu pentru etanșeizare.

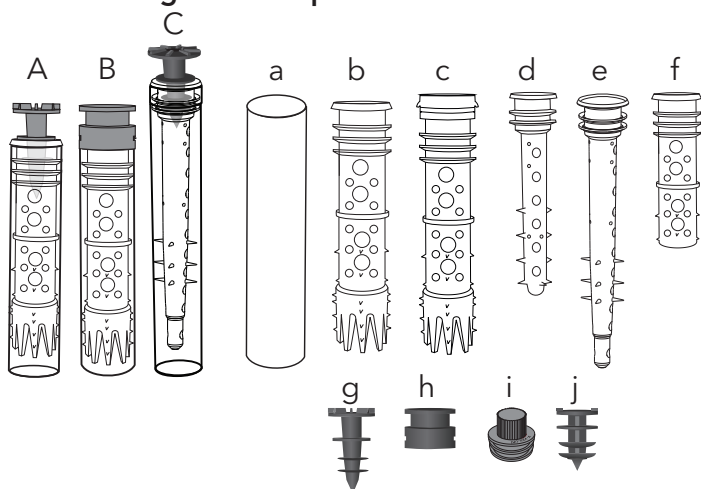Prezentare generală a produsului:



a - Tub Polipropilenă (PP), transparent, fără gradatie, nesteril

b, c, d, e, f - UP2 Retrofitter™, nesteril, polipropilenă densitate scăzută (LDPE), transparent (poate fi prevăzut cu folie aluminiu)

g, h, i, j - Capac Polipropilenă densitate scăzută (LDPE), nesteril

A - Tubul cu UP2 Retrofitter™ nesteril, de unică folosință se compune din: a+b+g

B - Tubul UP2 Retrofitter™ nesteril, de unică folosință se compune din: a+c+h

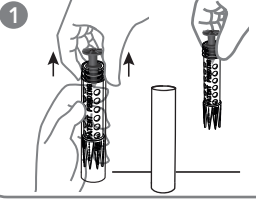
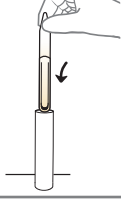
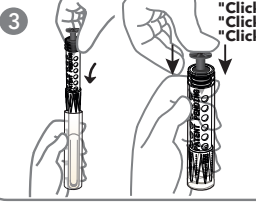
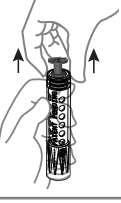
C - Tubul UP2 Retrofitter™ nesteril, de unică folosință se compune din: a+e+g

Informații de siguranță și avertismente

1. A nu se folosi produsul dacă ambalajul său este deteriorat.
2. Verificați fiecare ambalaj individual înainte de utilizare și nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.
3. Nu utilizați produsul după data de expirare inscripționată pe ambalajul său.
4. Tubul UP2 Retrofitter™ și capacul acestuia sunt de unică folosință, destinate doar pentru o singură utilizare. Aruncați toate produsele folosite în containerele de deșuri biologice periculoase.
5. Închideți recipientul pentru sistemele de analiză atunci când este necesar, cu capacul corespunzător. Dopurile folosite nu trebuie puse înapoi pe tuburi.
6. Manipulați toate probele biologice și ustensilele de colectare conform instrucțiunilor și procedurilor din instituția dumneavoastră. În cazul contactului direct cu probele biologice, consultați un medic din cauza riscului de transmitere a unor boli infecțioase. Urmați întotdeauna instrucțiunile și procedurile de siguranță ale unității dumneavoastră.
7. Depozitați tubul în poziție verticală și în conformitate cu condițiile de depozitare specificate pentru materialul specimenului prelevat.
8. Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să valideze utilizarea recipientului pentru combinațiile lor specifice de analiză-instrument/sistem de reactivi și condiții de păstrare a specimenelor.
9. Pentru utilizare în dispozitive sau automatizări, urmați instrucțiunile producătorului dispozitivului.

Utilizare

Profesionistul folosește sau obține și livrează pacientului tubul UP2 Retrofitter™

	Deschideți capacul tubului, împreună cu UP2 Retrofitter™ și țineți-l în mână, în timp ce așezați tubul pe o suprafață plană și curată.		Introduceți specimenul prelevat în interiorul tubului.
	Închideți capacul cu UP2 Retrofitter™ până ce se aude de 3 ori "Click", păstrând specimenul prelevat între pereții Retrofitter-ului și ai tubului.		Pentru efectuarea analizelor necesare, înlăturați capacul și urmați procedura standard a laboratorului, conform analizei pe care urmează să o realizați.

Pentru utilizarea (complet) automată, urmați instrucțiunile producătorului dispozitivului pe care îl veți folosi. Când este necesar, deschideți dopul sau găuriți folia de aluminiu pentru a avea acces în interiorul UP2 Retrofitter™ pentru pași sau analize ulterioare, conform protocoalelor laboratorului dumneavoastră.

Depozitare

Păstrați produsele neutilizate la temperatura camerei în spații curate și uscate, departe de surse de căldură și ferite de lumina directă a razelor solare.

Eliminare

1. Îndrumările și reglementările generale de igienă pentru eliminarea corectă a materialului infecțios trebuie cunoscute și respectate de către fiecare laborator.
2. Dacă un specimen conține sânge, toate dispozitivele de colectare a specimenelor trebuie clasificate ca prezentând risc biologic în ceea ce privește operațiunile de manipulare și eliminare de deșeuri. Este responsabilitatea fiecărui laborator să manipuleze, să trateze și să elimine deșeurile în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Recipientele neutilizate pot fi considerate nepericuloase și pot fi eliminate conform acestor criterii.
4. Etichetați corect tuburile cu numele pacientului, ID-ul, data și ora colectării și orice informații suplimentare solicitate de politica centrului.
5. Etichetați și ambalați în mod corespunzător orice recipient utilizat pentru transportul specimenului la o locație alternativă, în conformitate cu cerințele locale, de stat și federale aplicabile.

Glosar de simboluri

REF Număr de catalog

LOT Cod lot

 Data de expirare

CE Conformitate Europeană

IVD Dispozitiv medical de diagnostic *in vitro*

QTY Cantitate

 Nesteril

 Consultați instrucțiunile de utilizare pe site

 A nu se reutiliza

 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

 Producător

Modificări tehnice rezervate.

Toate incidentele grave legate de produs trebuie notificate producătorului și autorității naționale competente din statul în care este stabilit utilizatorul. Un „incident grav” este înțeles ca fiind un incident care implică decesul sau deteriorarea severă a stării de sănătate a unui pacient sau utilizator sau care reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea publică.

8XX7617ZW/YY
8XX7035ZW/YY

8XX8717ZW/YY
8XX7835ZW/YY

8XX10118ZW/YY
8XX7535ZW/YY

8XX10718ZW/YY
8XX8235ZW/YY