

Scop propus V-Veil UP2™ Colector

V-Veil UP2™ Colector este un dispozitiv medical folosit pentru colectarea de secreții, diverse lichide și substanțe din cavitățile naturale ale corpului și de pe piele.

Prezentare generală a produsului

V-Veil UP2™ Colector este un dispozitiv medical de unică folosință tratat UV-C.

Materiale

Polipropilenă (PP)

Polipropilenă densitate scăzută (LDPE)

100% Polietilenă/Poliester-bico


Informații pentru pacient privind autorecolectarea

Autorecolectarea este o modalitate de colectare de probe de către pacient. Dacă aveți întrebări despre autorecolectare, alte opțiuni de colectare a probelor și pentru sfaturi cu privire la pregătirea în vederea recoltării consultați furnizorul dumneavoastră de servicii medicale, doctorul sau farmacistul.



Colectarea probei

Important! Înainte de recoltarea sau auto-recoltarea probelor urmați recomandările laboratorului și/sau ale profesionistului din domeniul sănătății privind pregătirea prealabilă, momentul recoltării, utilizarea în timpul unui tratament sau a tratamentelor locale, consumul de alimente, igiena cavităților corporale, fumatul, sângerări locale etc.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos. Utilizați dispozitivul o singură dată. Dispozitivul nu trebuie reutilizat. Pentru rezultate fiabile, urmați procedurile cu atenție. Dacă aveți întrebări despre procedură, adresați-vă medicului dumneavoastră sau laboratorului.

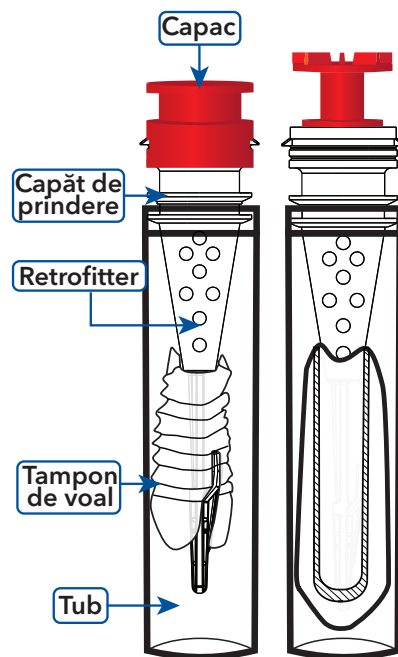



Brevete în așteptare

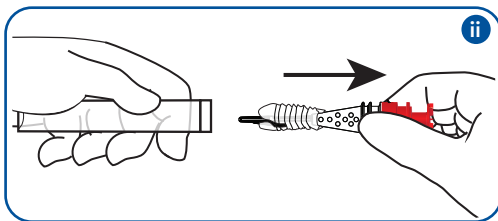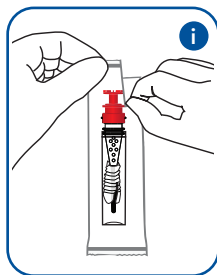

Deschideți ambalajul și scoateți dispozitivul (diagrama 1). Nu atingeți vârful sau tamponul de voal - materialul alb moale! Scoateți retrofitter-ul de recoltare din tub, dacă este prevăzut cu unul, (diagrama 2) și puneți tubul pe o suprafață plană și curată, urmând instrucțiunile de mai jos pentru a colecta proba sau probele solicitate.



Colectare bucală:

Urmați recomandările laboratorului și/sau specialistului din domeniul sănătății în ceea ce privește momentul recoltării, ingestia de alimente, igiena gurii, fumatul, etc. Răzuți ușor interiorul obrajilor, pe sub limbă și limba, rotind sau făcând mișcări de du-te-vino cu tamponul pentru a colecta celule și/sau salivă conform imaginilor alăturate.

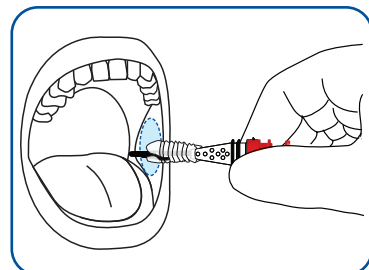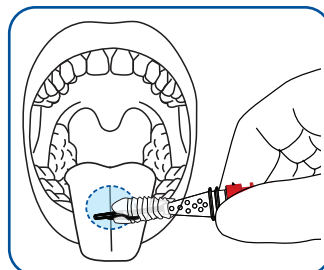

Colectare anală:


Metoda de inspecție cu tampon anal este utilizată pentru a verifica prezența paraziților sau a altor agenți patogeni. Urmați recomandările laboratorului și/sau specialistului din domeniul sănătății. Colectați proba prin simpla tamponare, frecare a părții exterioare a anusului cu partea alba și moale a dispozitivului sau introduceți ușor tamponul de voal în anus pe o distanță de 3-5 cm, apoi se rotește ușor pentru a-l scoate.

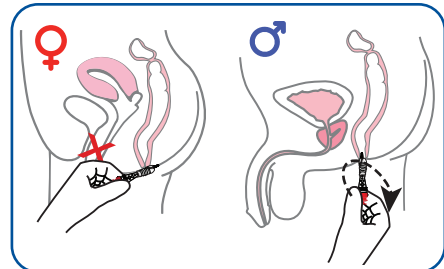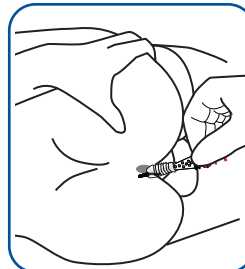

Pentru **colectarea de pe piele** frecați tamponul cu voal pe zona vizată (inghinală, perianală, axială etc), aplicând presiune moderată, pentru a colecta celule și secreții.

Colectarea probei de meat penian:

Țineți penisul cu mâna liberă (mâna fără dispozitiv). Folosind cealaltă mână (cu retrofitter-ul), introduceți ușor primii 5 milimetri din capătul subțire în deschiderea uretrală externă - deschiderea penisului prin care urinați - și rotiți ușor în sensul acelor de ceasornic o singură dată, doar dacă v-a fost recomandat. Asigurați-vă că rotiți complet pentru a obține

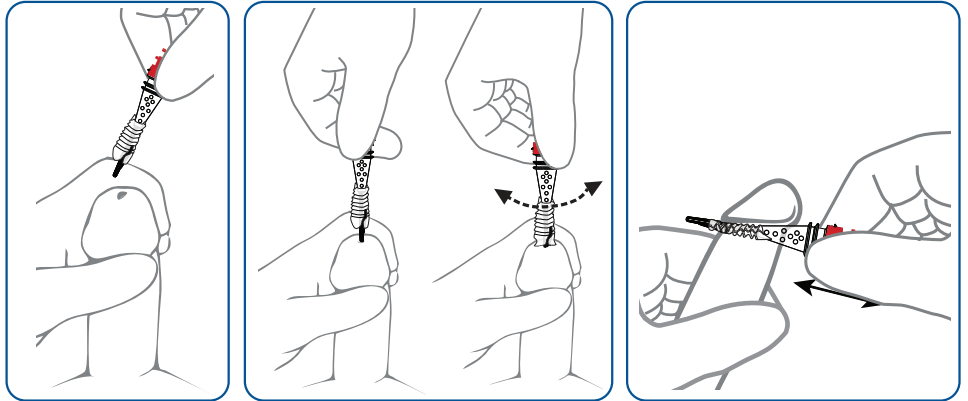


cea mai bună probă. Nu este necesar să introduceți adânc în deschiderea penisului și nici să învârtiți cu prea multă forță pentru a vă răni. După recoltarea din uretră (dacă a fost recomandată), ștergeți cu ajutorul părții prevăzută cu voal - materialul alb și moale - suprafața de sub gland, zona șanțului balano-prepuțial.

Introduceți proba recoltată în tub și apăsați pentru a închide capacul. Returnați dispozitivul medical cu proba colectată conform instrucțiunilor medicului sau laboratorului dumneavoastră.

Păstrare

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură și ferit de lumina directă a razelor solare și de apă.

După recoltare, este recomandată închiderea capacului și păstrarea probei așa cum v-a recomandat medicul sau laboratorul dumneavoastră, într-un loc curat și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a razelor solare.

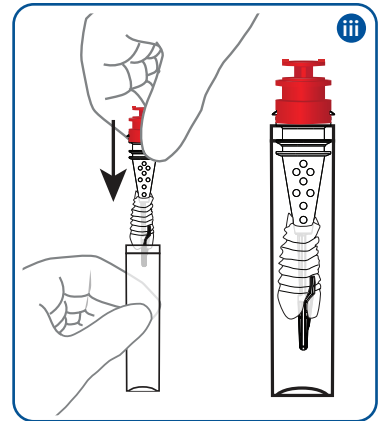

Raportarea incidentelor

IMPORTANT! Numai instrucțiunile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, în pofida măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că ați primit un produs cu defecte, vă rugăm să nu îl utilizați și să luați legătura cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți localizat. Dispozitivul medical V-Veil UP2™ Colector este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale Uniunii Europene.

CE	Conformitate Europeană
MD	Dispozitiv medical
UV-C TREATED	Tratat UV-C
ⓧ	Nu reutilizați
⚠	Atenție
📖	Citiți instrucțiunile
🚫	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
☂	A se păstra uscat
☀	A se păstra departe de lumina soarelui