

Scop propus V-Veil UP2™ Anal

V-Veil UP2™ Anal este un dispozitiv medical folosit pentru colectarea de secreții, diverse lichide și substanțe din cavitatea anală.

Prezentare generală a produsului

V-Veil UP2™ Anal este un dispozitiv medical de unică folosință, tratat UV-C.

Materiale

Polipropilenă (PP)
Polipropilenă densitate scăzută (LDPE)
100% Polietilenă/Poliester-bico

Recomandări

Pentru a evita contaminarea probei, se recomandă:

- Evitați contactul sexual receptiv, cu cel puțin 24-48 de ore înainte.
- Nu utilizați produse topice: creme, unguente, geluri, lubrifianți sau supozitoare în zona anală.
- Nu efectuați spălări vaginale (clisme): evitați dușurile rectale sau clismele în ultimele 24 de ore.
- Pentru femeile în timpul menstruației: menstruația nu afectează în mod direct testul anal, dar este obligatoriu să informați medicul dacă utilizați un tampon intern în timpul procedurii.

Informații pentru pacient privind autorecolectarea

Autorecolectarea este o modalitate de colectare de probe de către pacient. Dacă aveți întrebări despre autorecolectare, alte opțiuni de colectare a probelor și pentru sfaturi cu privire la pregătirea în vederea recoltării consultați furnizorul dumneavoastră de servicii medicale, doctorul sau farmacistul.


Pentru autorecolectarea probelor anale la pacienți/e minor/e, se recomandă consultarea reglementărilor locale, naționale și federale.

Colectarea probei anale


Dispozitivul de colectare probe din cavitatea anală poate fi folosit de către femei și de către bărbați. Spălați-vă pe mâini înainte de a începe.

Deschideți ambalajul dispozitivului (diagrama 1). Scoateți retrofitter-ul din tub conform diagramei 2 (dacă este prevăzut cu unul) și puneți tubul pe o suprafață curată și plană înainte de a executa colectarea. Nu atingeți vârful sau tamponul de voal - materialul alb și moale și nu așezați retrofitter-ul pe nicio suprafață! Dacă vârful sau tamponul de voal - materialul alb și moale este atins, este așezat sau este scăpat, utilizați un nou dispozitiv de recoltare. Ținând de capătul de prindere al retrofitter-ului, introduceți cu grijă partea cu tamponul de voal - materialul moale și alb (voalul) în rect la aproximativ 3-5 cm după marginea anală (partea exterioară a anusului), conform diagramei 3 pentru femei și conform diagramei 4 pentru bărbați.


După introducerea, rotiți ușor în sensul acelor de ceasornic de 2 ori (diagrama 5) și în sensul invers acelor de ceasornic, de alte 2 ori (diagrama 6). Întreaga operațiune de recoltare va dura de la 5 până la 10 secunde.

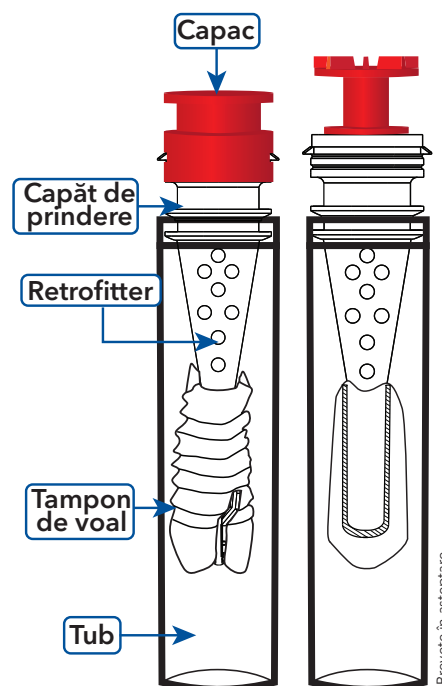

Brevete în așteptare

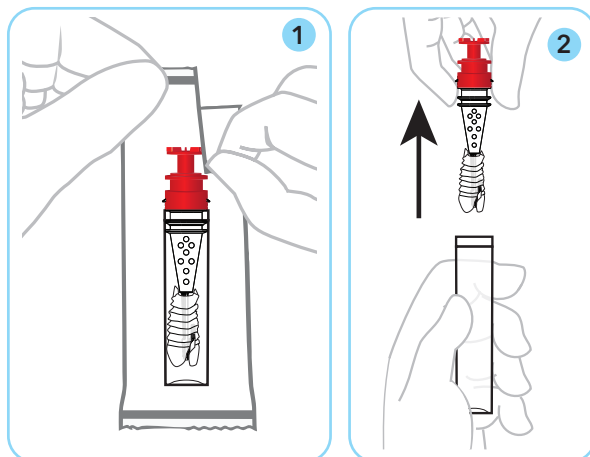

Copyright V-Veil-Up Production

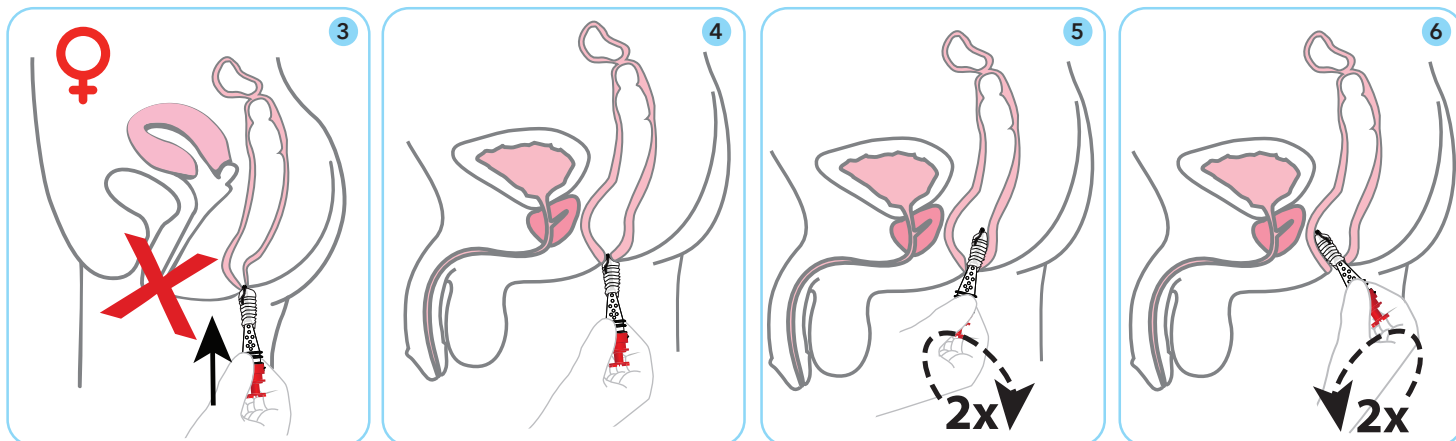


Retrageți retrofitter-ul ușor, fără a atinge pielea (diagrama 7).

După recoltare introduceți proba în tub și apăsați pentru a închide capacul, conform diagramei 8. Returnați dispozitivul medical cu proba colectată (diagrama 9) conform instrucțiunilor medicului sau laboratorului dumneavoastră.

Păstrare

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură și ferit de lumina directă a razelor solare și de apă.

După recoltare, este recomandată închiderea capacului și păstrarea probei așa cum v-a recomandat medicul sau laboratorul dumneavoastră, într-un loc curat și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a razelor solare.

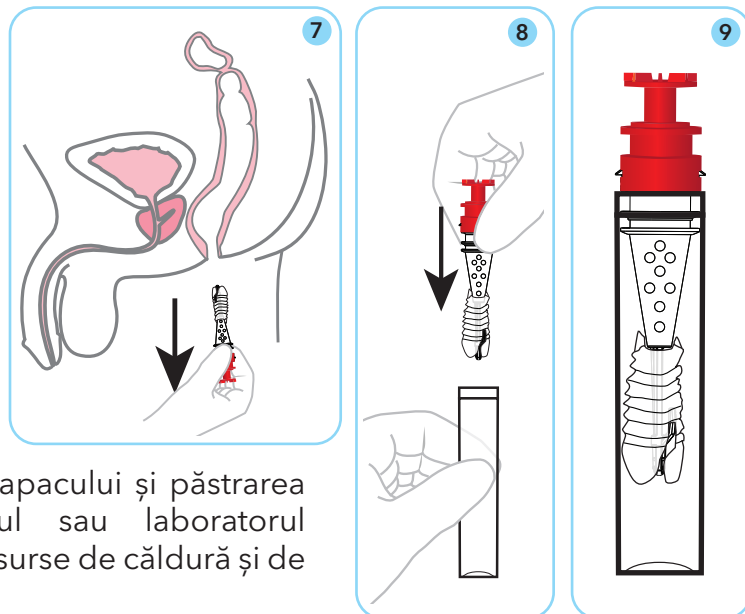

Raportarea incidentelor

IMPORTANT! Numai instrucțiunile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, în pofida măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că ați primit un produs cu defecte, vă rugăm să nu îl utilizați și să luați legătura cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți localizat.

V-Veil UP2™ Anal este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale Uniunii Europene.

	Conformitate Europeană
	Dispozitiv medical
	Tratat UV-C
	Nu reutilizați
	Atenție
	Citiți instrucțiunile
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	A se păstra uscat
	A se păstra departe de lumina soarelui

The instructions for use are available for the following codes:

ANR60V14, ANR93V24, ANR60V13F, ANR93V23F, ANR60V134, ANR60V, ANR93V.



Importator autorizat (dacă este cazul): vedeți informațiile înscrise pe ambalaj



Distribuitor autorizat (dacă este cazul): vedeți informațiile înscrise pe ambalaj

REF IFU: ANR-RO V02 2026.07

V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Ciocanesti 280B Calinesti

117197 Arges ROMANIA

client@vvup.org

TEL : 0040 348 420 620