


Prelevarea simultană de celule din endocervix și ectocervix

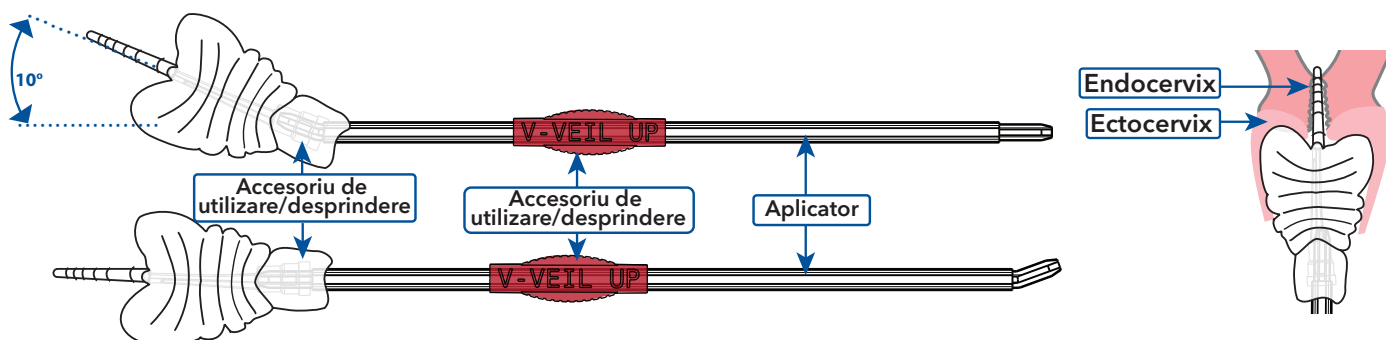

Scop propus Periuța Cervicală V-Veil UP2™

Periuța Cervicală V-Veil UP2™ este un dispozitiv medical, folosit pentru colectarea de celule cervicale, secreții, diverse lichide și substanțe din cervix și din cavitatea vaginală.

Prezentare generală a produsului

Dispozitiv medical de unică folosință, tratat UV-C, cu capăt detașabil. A se utiliza numai de către personal medical calificat. Dispozitivul medical Periuța Cervicală V-Veil UP2™ are în componență Polipropilenă (PP) și 100% Polietilenă/Poliester-bico. Dispozitivul poate fi prevăzut cu accesoriu de utilizare/desprindere.

Contraindicații

Dispozitivul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

A nu se utiliza pentru persoanele alergice la materiale plastice.


Nu utilizați lubrifianți sau alte produse care conțin substanțe precum carbomeri.

Colectarea probei



Important! Înainte de recoltarea sau auto-recoltarea probelor urmați recomandările laboratorului și/sau ale profesionistului din domeniul sănătății privind pregătirea prealabilă, momentul recoltării, utilizarea în timpul unui tratament sau a tratamentelor locale, consumul de alimente, igiena cavităților corporale, fumatul, sângerări locale etc.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos. Utilizați dispozitivul o singură dată. Dispozitivul nu trebuie reutilizat. Pentru rezultate fiabile, urmați procedurile cu atenție. Dacă aveți întrebări despre procedură, adresați-vă medicului dumneavoastră sau laboratorului.

Deschideți ambalajul și scoateți dispozitivul (diagrama 1). În funcție de poziția colului uterin și a cervixului, puteți alege să utilizați dispozitivul cu capăt înclinat la 10° prezentat în diagrama 2 sau dispozitivul cu capătul neîncălat, conform diagramei 3. Introduceți vârful dispozitivului de colectare în canalul endocervical suficient de adânc pentru a permite voalului să intre complet în contact cu ectocervixul. Apăsăți ușor și rotiți peria în sensul acelor de ceasornic de 2 ori și în direcția opusă formând 4 rotații complete de 360° grade, după care retrageți-l.

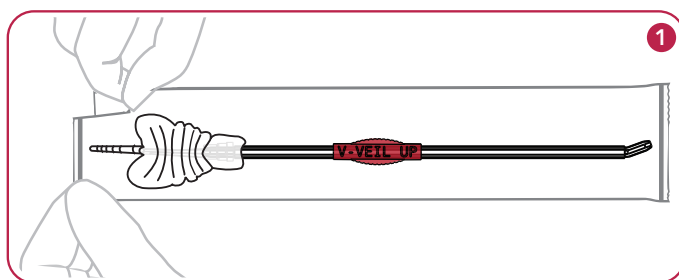

ATENȚIE: Dacă dispozitivul este prevăzut cu accesoriul de utilizare/desprindere, aveți grijă să nu introduceți accesoriul în interiorul cavității vaginale!

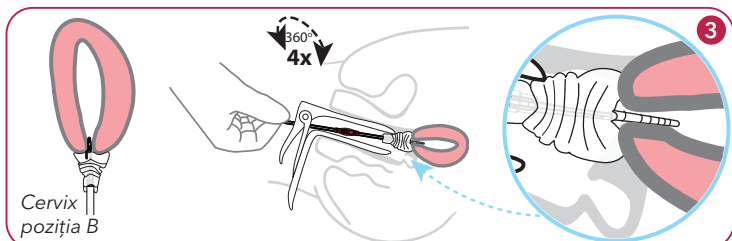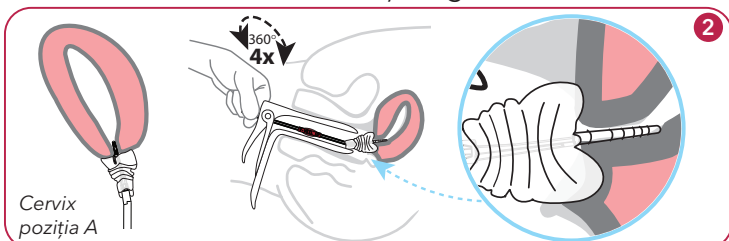


Pregătire

Opțiunea A


Introduceți dispozitivul cu proba recoltată în recipientul necesar trimiterii la laborator. Cu dispozitivul complet scufundat în soluția de conservare sau a fixatorului de probe biologice, rotiți-l energic de cel puțin 2, până la 6 ori în fiecare direcție pentru a elibera materialul, conform diagramei 4. Inspectați vizual periuța cervicală V-Veil UP2™, pentru a vă asigura că nu a mai rămas material atașat, iar dacă a mai rămas, reluați procedura de la diagrama 4.

Respectând recomandările de utilizare a producătorului de soluție de conservare, puteți arunca dispozitivul de colectare după introducerea (diagrama 5a) sau îl puteți lăsa înăuntru (diagrama 5b). Dispozitivul nu plutește (diagrama 6). Depozitați și returnați proba conform instrucțiunilor laboratorului dumneavoastră.

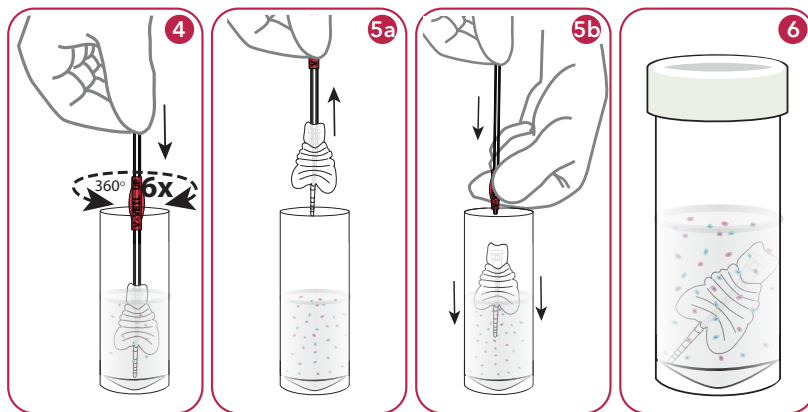

Opțiunea B Transferați materialul celular pe lamă cu mișcări de vopsire, mai întâi pe o parte și apoi pe cealaltă parte a dispozitivului (diagrama 7). Aplicați imediat fixativ pe lamă (diagrama 8).


ATENȚIE! Recipientul de colectare și transport nu este inclus.

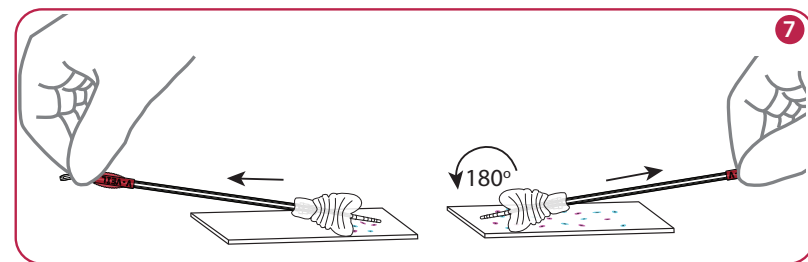

Păstrare

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură și ferit de lumina directă a razelor solare și de apă.

După recoltare, este recomandată păstrarea probei conform instrucțiunilor laboratorului dumneavoastră, a soluției de conservare sau a fixatorului de probe biologice. Dacă proba recoltată este depozitată incorect, eficacitatea acestuia poate fi compromisă.

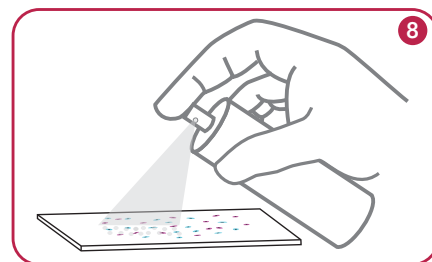

Raportarea incidentelor

IMPORTANT! Numai instrucțiunile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, în pofida măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că ați primit un produs cu defecte, vă rugăm să nu îl utilizați și să luați legătura cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți localizat. Dispozitivul Periută Cervicală V-Veil UP2™ este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale Uniunii Europene.

BRS198V7635C

BRS202V7635

	Conformitate Europeană
	Dispozitiv medical
	Tratat UV-C
	Nu reutilizați
	Atenție
	Citiți instrucțiunile
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	A se păstra uscat
	A se păstra departe de lumina soarelui

Brevete în așteptare

Importator autorizat (dacă este cazul): vedeți informațiile înscrise pe ambalaj
 Distribuitor autorizat (dacă este cazul): vedeți informațiile înscrise pe ambalaj

V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Ciocanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620