

Scop propus V-Veil UP2™ Oral

V-Veil UP2™ Oral este un dispozitiv medical utilizat pentru colectarea secrețiilor orofaringiene și bucale prin expectorație profundă și/sau scuipare.


Prezentare generală a produsului

Dispozitivul medical este de unică folosință și este tratat UV-C. Dispozitivul medical V-Veil UP2™ Oral are în componență Polipropilenă (PP) și 100% Polyethylene/Polyester-bico. Dispozitivul poate fi prevăzut cu elemente de fixare pentru a putea fi utilizat împreună cu diverse tuburi.


Colectarea probei

Urmați recomandările laboratorului și/sau specialistului din domeniul sănătății în ceea ce privește pregătirea pentru recoltarea probei, momentul recoltării, ingestia de alimente, igiena gurii, fumatul, etc.

Deschideți ambalajul și scoateți dispozitivul (diagrama 1). Prindeți suportul voalului (piesa ovală din material tare) de cele două părți ieșite în exterior ținându-l de zona de prindere (diagrama 2). Tușiți cu putere din interiorul pieptului timp de 3-6 minute pe voal – materialul alb și moale conform diagramei 3. Dacă doctorul sau specialistul, pentru a identifica o posibilă infecție bacteriană, virală sau fungică, v-a recomandat să scuipați expectorația – sputa, o puteți face pe voal. Dacă doctorul sau specialistul v-a recomandat o utilizare succesivă respectați strict indicațiile personalului medical calificat.

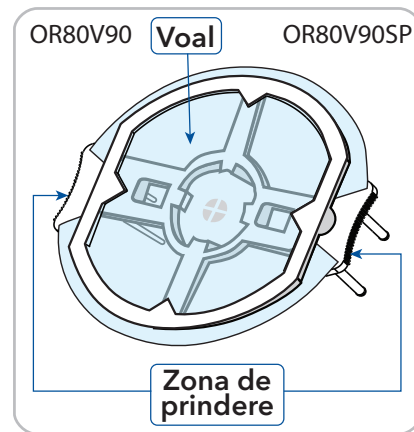

Brevete în așteptare

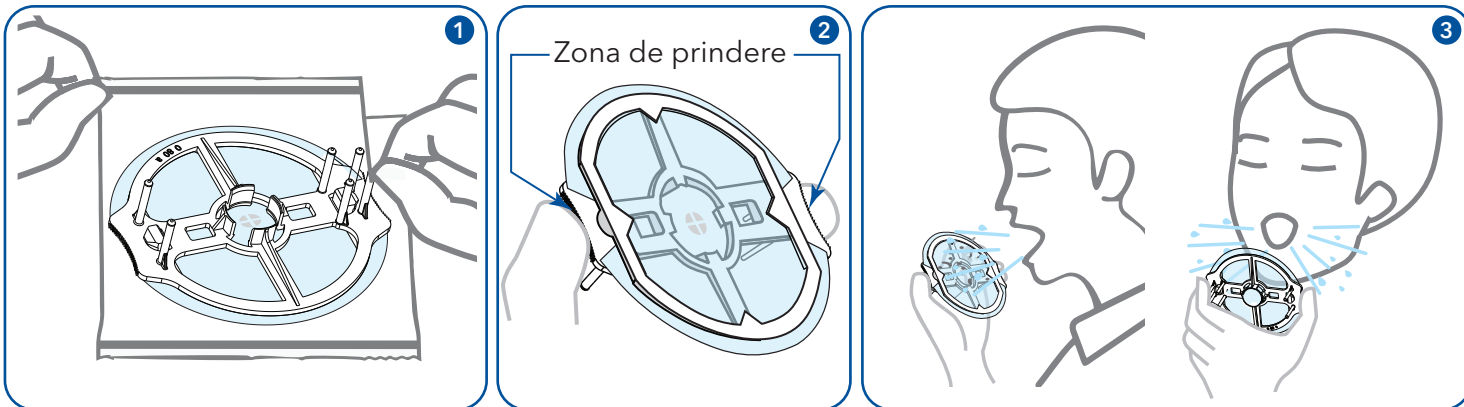

ATENȚIE! Recipientul de colectare și transport nu este inclus. Utilizați recipientul recomandat sau oferit de personalul medical.

Păstrare

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură și ferit de lumina directă a razelor solare și de apă.

După colectare, este recomandată păstrarea probei conform instrucțiunilor personalului medical calificat și conform recomandărilor soluției de conservare sau a fixatorului de probe biologice, dacă acesta a fost folosit.

Dacă proba recoltată este depozitată incorect, eficacitatea acesteia va fi compromisă.

Raportarea incidentelor

IMPORTANT! Numai instrucțiunile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, în pofida măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că ați primit un produs cu defecte, vă rugăm să nu îl utilizați și să luați legătura cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți localizat. Dispozitivul V-Veil UP2™ Oral este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale Uniunii Europene.

 Importator autorizat (dacă este cazul): vedeți informațiile înscrise pe ambalaj

 Distribuitor autorizat (dacă este cazul): vedeți informațiile înscrise pe ambalaj

	Conformitate Europeană
	Dispozitiv medical
	Tratat UV-C
	Nu reutilizați
	Atenție
	Citiți instrucțiunile
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	A se păstra uscat
	A se păstra departe de lumina soarelui

V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Ciocanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620

Copyright V-Veil-Up Production