


Tampon de Voal V-Veil UP2™ Tiny

Instrucțiuni de utilizare

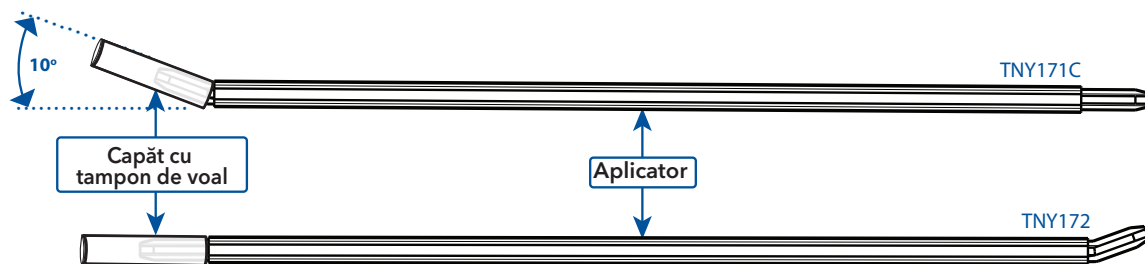

Scop propus Tampon de Voal V-Veil UP2™ Tiny

Tamponul de Voal V-Veil UP2™ Tiny este un dispozitiv medical folosit pentru colectarea de secreții, diverse lichide și substanțe din cavitățile naturale ale corpului și de pe piele.

Prezentare generală a produsului

Dispozitiv medical de unică folosință, tratat UV-C. Dispozitivul medical Tampon de Voal V-Veil UP2™ Tiny are în componență Polipropilenă și 100% Polietilenă/Poliester-bico.

Contraindicații

A nu se utiliza pentru persoanele alergice la materiale plastice.

Informații pentru pacient privind autorecolectarea

Autorecolectarea este o modalitate de colectare de probe de către pacient. Dacă aveți întrebări despre autorecolectare, alte opțiuni de colectare a probelor și pentru sfaturi cu privire la pregătirea în vederea recoltării consultați furnizorul dumneavoastră de servicii medicale, doctorul sau farmacistul.

Colectarea probei


Important! Înainte de recoltarea sau auto-recoltarea probelor urmați recomandările laboratorului și/sau ale profesionistului din domeniul sănătății privind pregătirea prealabilă, momentul recoltării, utilizarea în timpul unui tratament sau a tratamentelor locale, consumul de alimente, igiena cavităților corporale, fumatul, sângerări locale etc.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos. Utilizați dispozitivul o singură dată. Dispozitivul nu trebuie reutilizat. Pentru rezultate fiabile, urmați procedurile cu atenție. Dacă aveți întrebări despre procedură, adresați-vă medicului dumneavoastră sau laboratorului.

Deschideți ambalajul și scoateți dispozitivul (diagrama i). Nu atingeți vârful sau tamponul de voal - materialul alb moale și nu așezați dispozitivul pe nici o suprafață.

Colectare nazală


Introduceți cu atenție tamponul de voal într-o nară, avansând pe calea inferioară a nasului până când simțiți o ușoară rezistență. Rotiți tamponul pe mucoasă timp de câteva secunde pentru a colecta o cantitate suficientă de secreție. Folosiți același tampon pentru a repeta procedura și în a doua nară.

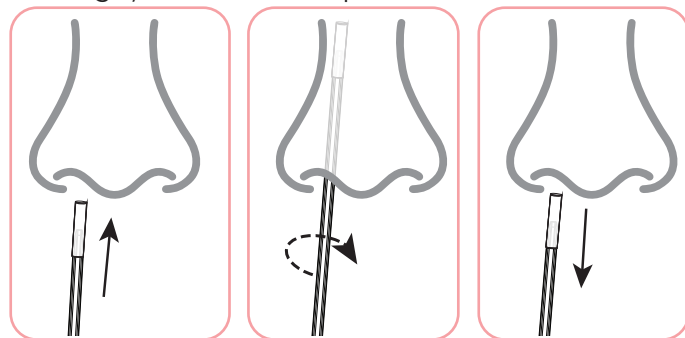

Colectare bucală

Urmați recomandările laboratorului și/sau ale profesionistului din domeniul sănătății privind momentul recoltării, ingestia alimentară, igiena gurii, fumatul etc.

Răzuți ușor interiorul obrazilor, pe sub limbă și limba, rotind sau făcând mișcări de du-te-vino cu tamponul pentru a colecta celule și/sau salivă conform imaginilor alăturate.

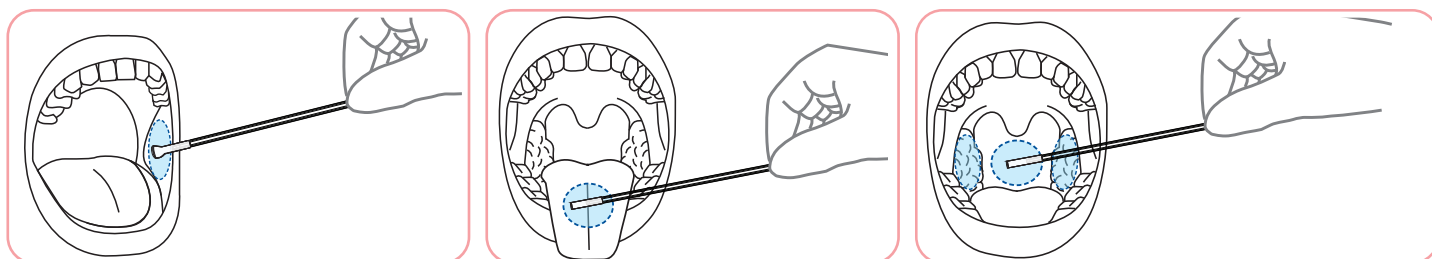


Colectare vaginală

Dispozitivul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Nu utilizați lubrifianți sau alte produse care conțin substanțe precum carbomeri.

Colectarea probei se va face înainte de examinarea pelviană, cu specul sau manuală.

Introduceți ușor tamponul de voal în vagin conform diagramei a. Dacă voalul nu alunecă, rotiți-l ușor în timp ce împingeți. Dacă este încă dificil, nu continuați.

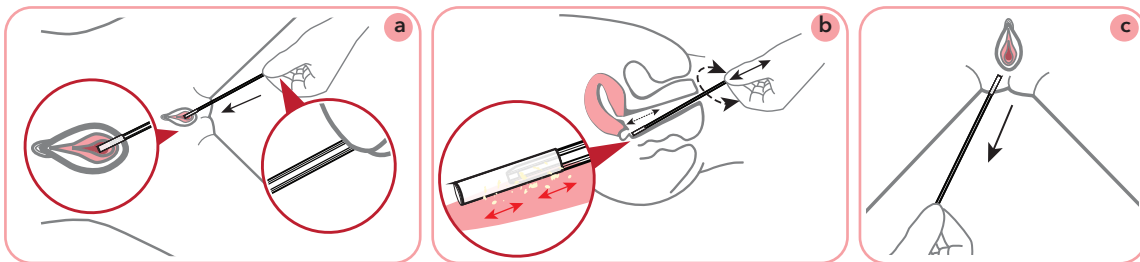


Rotiți sau faceți mișcări de du-te-vino a tamponului de voal timp de 10 până la 15 secunde, conform diagramei b (cu ajutorul accesoriului de utilizare/desprindere, dacă este prevăzut). Retrageți tamponul fără a atinge pielea din afara vaginului conform diagramei c.

Colectare anală

Metoda de inspecție cu tampon anal este utilizată pentru a verifica prezența paraziților sau a altor agenți patogeni.


Pacientul este așezat în poziție genunchi-piept sau decubit lateral. Se introduce ușor un tampon de voal în anus pe o distanță de 3-5 cm și se rotește de 4-6 ori, înainte de a-l scoate.

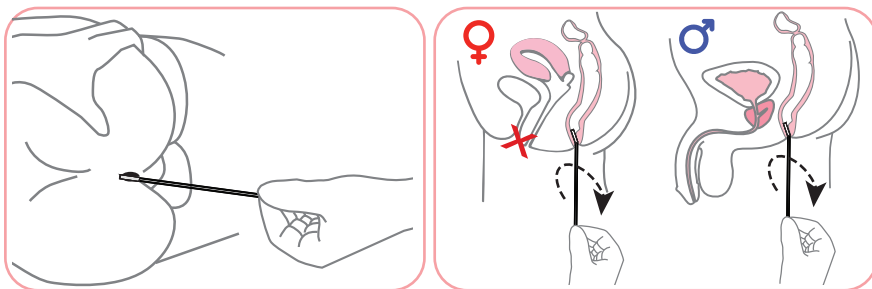

Pentru **colectarea de pe piele** frecați tamponul cu voal pe zona vizată (inghinală, perianală, axială etc), aplicând presiune moderată, pentru a colecta celule și secreții.

Opțiunea A După recoltare introduceți dispozitivul cu proba recoltată în recipientul necesar trimeriei la laborator. Cu ajutorul unei foarfece tăiați aplicatorul, la aproximativ 1 cm de capatul cu voal, lăsând ca partea cu voalul impregnat să cada liber în recipientul de colectare. **ATENȚIE!** Recipientul de colectare și transport nu este inclus.

Opțiunea B Transferați materialul celular pe lamă cu mișcări de vopsire, mai întâi pe o parte și apoi pe cealaltă parte a dispozitivului. Aplicați imediat fixativ pe lamă.

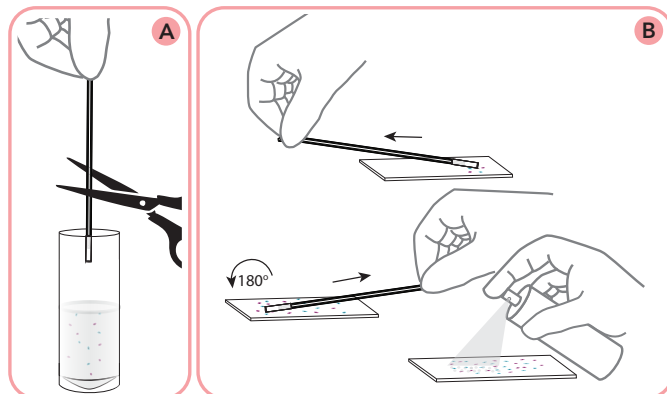

Păstrare

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură și ferit de lumina directă a razelor solare.

După recoltare, este recomandată închiderea capacului recipientului de colectare și păstrarea probei conform recomandărilor laboratorului sau specialistului din domeniul sănătății.

Raportarea incidentelor

IMPORTANT! Numai instrucțiunile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, în pofida măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că ați primit un produs cu defecte, vă rugăm să nu îl utilizați și să luați legătura cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți localizat. Dispozitivul Tampon de Voal V-Veil UP2™ Tiny este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale Uniunii Europene.

	Conformitate Europeană
	Dispozitiv medical
	Tratat UV-C
	Nu reutilizați
	Atenție
	Citiți instrucțiunile
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	A se păstra uscat
	A se păstra departe de lumina soarelui

Brevete în așteptare